

**LÍNEA OXINOVA® PARA AEROSOLTERAPIA** CÓDIGOS DE PRODUCTOS

**NEBULIZADOR II**

|       |  |
|-------|--|
| 75075 | Nebulizador II                                 |
| 75076 | Nebulizador II con mascarilla adultos          |
| 75078 | Nebulizador II con mascarilla infantil         |
| 75079 | Nebulizador II con pieza bucal                 |
| 75080 | Nebulizador II con mascarilla adultos Plus     |
| 75082 | Nebulizador II con conexión traqueal           |
| 75083 | Nebulizador II sin tubo                        |
| 75081 | Nebulizador II para circuitos respiratorios    |
| 75034 | Nebulizador II adultos con conexión DISS       |
| 75037 | Nebulizador II con pieza bucal y conexión DISS |

Todos nuestros artículos incorporan en el envase el código de barras EAN 128

**MASCARILLAS**

|       |  |
|-------|--|
| 75007 | Mascarilla adultos aerosolterapia      |
| 75093 | Mascarilla adultos Plus aerosolterapia |
| 75021 | Mascarilla infantil aerosolterapia     |

**MASCARILLAS CLEAR**

|       |  |
|-------|--|
| 75100 | Mascarilla aerosolterapia adultos Clear      |
| 81777 | Mascarilla aerosolterapia infantil Clear     |
| 81780 | Mascarilla aerosolterapia adultos plus Clear |

**CIRCUITO DE PENTAMIDINA II**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 75084 | Circuito de pentamidina II |
|-------|----------------------------|

**ACCESORIOS**

|       |               |
|-------|---------------|
| 75050 | Conector DISS |
|-------|---------------|

**Para más información:**

Teléfono de información: 91 657 95 95  
 Av. Matapiñonera, n. 9  
 28700 San Sebastián de los Reyes • Madrid  
 e-mail: infomedical@carburos.com

**te escuchamos**  
[www.carburosmedica.com](http://www.carburosmedica.com)

www.prozestudio.com

365-04-012-SP/Jul05



Línea OXINOVA® para  
**Aerosolterapia**

# NEBULIZADOR II

OXINOVA® es una línea completa de desechables respiratorios que ofrece el máximo confort al paciente y la total seguridad en el tratamiento médico.

La actualización permanente de la línea OXINOVA® permite ofrecer siempre las últimas innovaciones técnicas. Toda la gama cumple con los requisitos de la marca CE de productos sanitarios.

## ESPECIFICACIONES

Caudal de arrastre: desde 4 a 10 l/min  
 Capacidad máxima: 10 ml.  
 Tamaño de partícula (MMD): regulable desde 4,5µ a 3µ  
 Porcentaje de partículas < 5µ : >80%  
 Tiempo de nebulización para 2 ml:

|                 | FLUJO   |          |
|-----------------|---------|----------|
|                 | 6 l/min | 10 l/min |
| Ventana cerrada | 10 min  | 5 min    |
| Ventana abierta | 6 min   | 4 min    |



La gama de nebulizadores OXINOVA® de un solo uso, está basada en el principio Venturi y permite la utilización de aire u oxígeno como gas de arrastre.

El Nebulizador II ha sido diseñado para dispensar la medicación con el máximo de eficacia terapéutica y permite utilizar indistintamente mascarilla o pieza bucal.

Sus características lo hacen indispensable para una cómoda y segura utilización:

- Regulación del tamaño de partículas y del tiempo de nebulización, para ajustarlo a las distintas terapias.
- Sistema antivuelco que permite la nebulización incluso en posición horizontal, sin riesgo de derrame de líquido.
- Mínimo volumen residual para obtener el máximo aprovechamiento de la solución.
- Recipiente de nebulización transparente graduado de 2 a 10 ml para una correcta administración del medicamento.

## DATOS TÉCNICOS

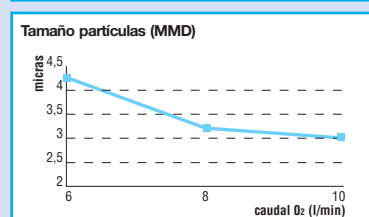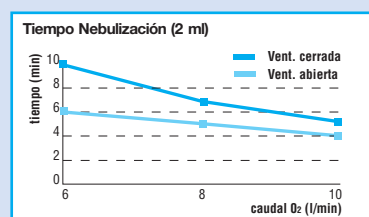

## MASCARILLA DE AEROSOLTERAPIA

La mascarilla para aerosolterapia OXINOVA® está diseñada especialmente para proporcionar el máximo confort al paciente.

La banda de aluminio para ajuste a la nariz proporciona una mayor adaptación a la cara del paciente evitando fuga de medicación.

La rótula móvil que la conecta al nebulizador directamente o a través de un tubo de 22 mm., permite elegir la posición más cómoda para el paciente.



## MASCARILLA DE AEROSOLTERAPIA CLEAR

También existe la mascarilla para aerosolterapia Clear con un diseño transparente.



## CIRCUITO PENTAMIDINA

Este circuito desechable OXINOVA® ha sido específicamente diseñado para garantizar una segura y eficaz administración del aerosol, ya sea pentamidina o cualquier otro medicamento, consiguiendo el máximo ahorro de la solución y evitando la contaminación ambiental química o microbiológica.

### COMPONENTES:

- Filtro vírico, de alta eficacia.
- Válvulas unidireccionales, para garantizar el máximo aprovechamiento.
- Reservorio, que asegura la misma concentración en todas las inspiraciones.

## NEBULIZADOR II PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS

Para administración de aerosol a pacientes en ventilación mecánica.



## NEBULIZADOR II CON CONEXION TRAQUEAL

Permite el tratamiento de pacientes traqueostomizados, para la administración de medicación o para la humidificación necesaria antes de procedimientos de aspiración.



## PIEZA BUCAL

Accesorio diseñado para conseguir la máxima comodidad y aprovechamiento de la medicación.