

Caudalímetros Ultra-Flo II



Uso clínico

Ultra-Flo II es un regulador de caudal de rotámetro de bola para uso hospitalario en las unidades terminales de Oxígeno y/o Aire.

Sencillez de uso y gran fiabilidad, permitiendo el suministro de gas dosificado a paciente directamente o bien a través de humidificador mediante la salida DISS que incorpora.

Innovación y diseño ergonómico

Escala de fácil lectura, alta precisión y orientable 360° en todo momento para una mejor lectura y adaptable al usuario.

Disponibilidad de dos salidas (humidificador y espiga), fácilmente seleccionadas por el mando selector de dos posiciones.

Variedad de modelos

- Sencillo o doble.
- Conexión directa con conectores selectivos o mediante raíl.
- Salida humidificador.
- Salida humidificador y espiga con selector integrado.




Calidad y seguridad

Diseñado según la norma UNE-EN ISO 15002 y certificado como Producto Sanitario Clase IIa según la directiva 93/42/CEE.

Características técnicas

Integración del selector completo con salidas espiga y humidificador, lo que hace de este modelo un equipo compacto y reducido.

Caperuza exterior y rotámetro interior orientables 360°, para facilitar la lectura y adaptarlo en cada momento a la necesidad del usuario.

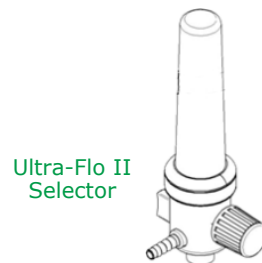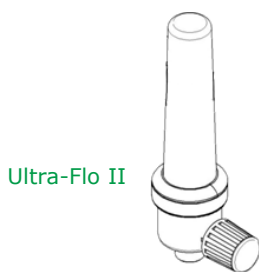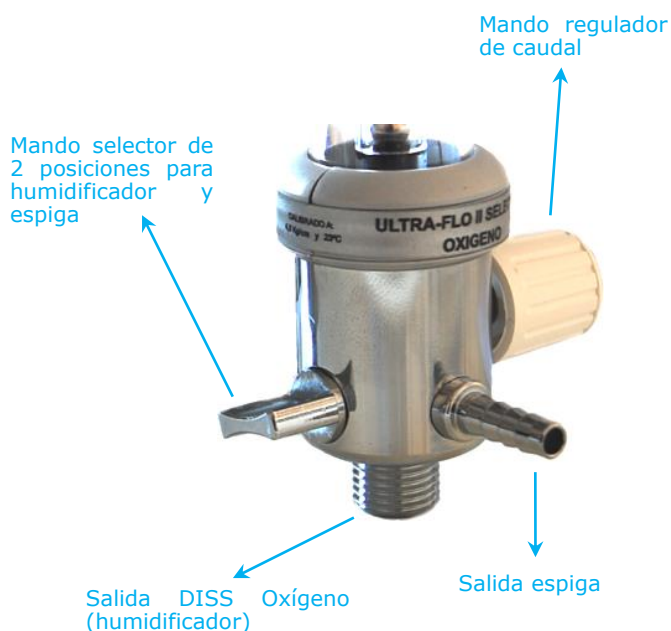

Material cuerpo	Latón cromado	Latón cromado
Material caperuza y rotámetro	Polycarbonato	Polycarbonato
Material bola	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material filtro de entrada	Bronce sinterizado	Bonce sinterizado
Dimensiones	Ø31x148 mm	Ø31x157 mm
Peso (sin conector)	225 g.	290 g.
Presión de entrada	4,5 bar	4,5 bar
Precisión	±10%	±10%
Calibración	101.3 kPa y 23°C	101.3 kPa y 23°C
Salidas	DISS O2 UNF 9/16"	DISS O2 UNF 9/16" y espiga
Gas	Oxígeno y Aire Medicinal	Oxígeno y Aire Medicinal
Caudal	15 l/min	15 l/min

Modelos caudalímetro conexión directa

Conector selectivo incorporado para su conexión a la unidad terminal.



Sencillo




Doble

Listado de códigos de modelos con conexión directa

Tipo conector	Ultra-Flo II Oxígeno		Ultra-Flo II Selector Oxígeno		Ultra-Flo II Aire Medicinal	
	Sencillo	Doble	Sencillo	Doble	Sencillo	Doble
CM	75423	75427	75438	75442	75462	75466
MM	75420	75424	75435	75439	75459	75463
NF	75421	75425	75436	75440	75460	75464
FRO	129768	129769	160278	160284	129770	129771
AGA	160215	160219	160280	160286		
DIN	75422	75426	75437	75441	75461	75465
BS	154822	160220	160281	160287	154823	160321
BOC SACCAB	160216	160221	160282	160288		
NASSETTI	120182	120179	120180	160290		

Modelos caudalímetro conexión a raíl

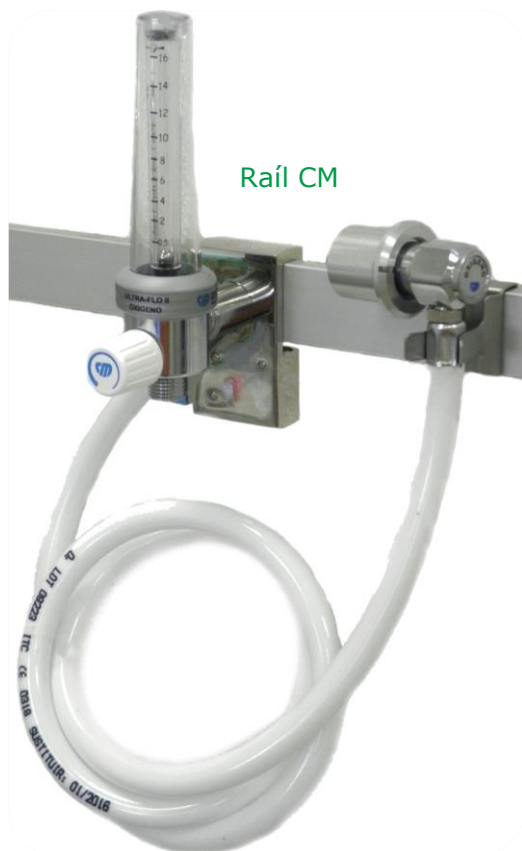

Tubo atóxico flexible con refuerzo de fibra de poliéster de 1,5 metros de longitud, sección ext./int. Ø12mm/ Ø6mm y presión de trabajo de 12 Kg/cm².

Listado de códigos de modelos con conexión a raíl y grapa pomo

Tipo conexión	Ultra-Flo II Oxígeno		Ultra-Flo II Selector Oxígeno		Ultra-Flo II Aire Medicinal	
	Sencillo	Doble	Sencillo	Doble	Sencillo	Doble
Raíl CM & CM	75431	160242	75455	160310	75470	
Grapa pomo & CM	75434	160251	75458	160319	75473	
Raíl CM & MM	160223	160235	160292	160303		
Grapa pomo & MM	160229	160244	120181	160312		
Raíl CM & NF	75429	160236	75453	160304	75468	160324
Grapa pomo & NF	75432	160245	75456	160313	75471	160326
Raíl CM & FRO	160224	160237	160293	160305		
Grapa pomo & FRO	160230	160246	160298	160314		
Raíl CM & AGA	160225	160238	160294	160306		
Grapa pomo & AGA	160231	160247	160299	160315		
Raíl CM & DIN	75430	160239	75454	160307	75469	
Grapa pomo & DIN	75433	160248	75457	160316	75472	
Raíl CM & BS	160226	160240	160295	160308	160322	160325
Grapa pomo & BS	160232	160249	160300	160317	160323	160327
Raíl CM & BOC SACCAB	160227	160241	160296	160309		
Grapa pomo & BOC SACCAB	160233	160250	160301	160318		
Raíl CM & NASSETTI	160228	160243	160297	160311		
Grapa pomo & NASSETTI	160234	160252	160302	160320		

Accesorios / Repuestos Ultra-Flo II



Código 75475
Flo II selector



Código 437758
Frasco humidificador
desechable




Código 437757
Conector DISS oxígeno
Bolsa de 30 unidades

Código 478793
Conjunto escala O2 0-15 l/min
Código 478794
Conjunto escala O2 0-15 l/min selector
Código 478795
Conjunto escala Aire 0-15 l/min
Ultra-Flo II




Item	Descripción
1	Tope superior
2	Escala 0-15l/min
3	Bola de acero
4	Tope inferior
5	Caperuza
6	Semibrida (2uds)
7	Anilla de cierre
8	Junta tórica Ø20xØ2mm
9	Junta tórica Ø5x1,5mm
10	Adhesivo Ultra-Flo II - O2
11	Adhesivo Ultra-Flo II - O2 selector
12	Adhesivo Ultra-Flo II - Aire

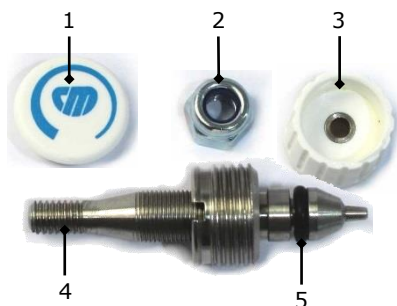

Código 478796
Conjunto mando regulación
Ultra-Flo II

Item	Descripción
1	Tapa botón CM
2	Tuerca cierre
3	Cuerpo mando
4	Punzón válvula
5	Junta tórica Ø3xØ1,5mm

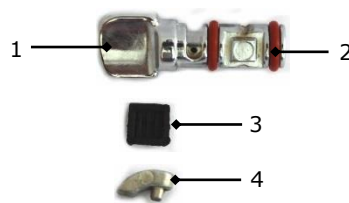

Código 478797
Conjunto selector
Ultra-Flo II

Item	Descripción
1	Eje selector
2	Junta tórica Ø8xØ1,5mm (2 uds)
3	Almohadilla
4	Uñeta

Importante: No se suministran los componentes por separado de cada conjunto